

FILET DE RENFORT ABDOMINAL




Préconisé pour les hernioplasties, les éventrations et les prolapsus rectaux et génito-urinaires par voie laparoscopique ou par voie transpariétale.

A partir de fibre de polypropylène extrudé : SURGIMESH® est un filet de renfort tricoté, indémaillable, confortable, transparent, non-résorbable, ne comportant aucun dérivé d'origine animale ou humaine convenant aux indications suivantes : hernies et éventrations par voie transpariétale ou par voie coelioscopique, prolapsus rectaux et génito-urinaires. SURGIMESH® a été spécialement étudié pour offrir une structure résistante appréciée des praticiens. SURGIMESH® est fabriqué en France.

MONOFILAMENT 100% POLYPROPYLENE

TRICOTAGE SPÉCIFIQUE À MÉMOIRE DE FORME

TRICOTAGE AJOURÉ ET SOUPLE PERMETTANT UNE POROSITÉ DE L'IMPLANT DONC UNE BONNE COLONISATION (POUR UN BON DRAINAGE DU SITE)

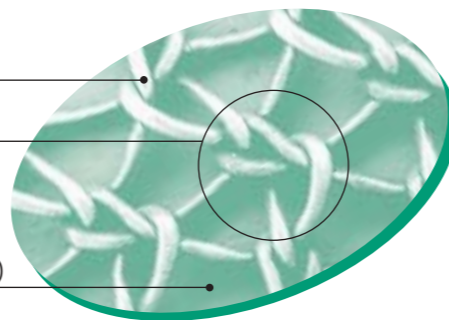

■ PROPRIÉTÉS : Composition : 100 % polypropylène. Hautes caractéristiques physiques : excellente tenue mécanique dans le temps, inertie chimique (biocompatibilité), apyrogène, faible poids spécifique (85 g/m²), élasticité et extensibilité (bidirectionnelle), souplesse du treillis.

■ CARACTÉRISTIQUES : Insensible à l'humidité : matériau hydrophobe. Taux de cristallinité de 60%. Résistance à l'éclatement du filet : 11 kg/cm². Les caractéristiques mécaniques demeurent inchangées lors de l'implantation. Livré en double enveloppes Tyvek. A usage unique.

ABDOMINAL REINFORCEMENT NET




Recommended for surgical repair of hernia, ruptures, rectal and genito-urinary prolapses either by laparoscopic route or by transparietal route.

Made from extruded monofilament polypropylene fibre: SURGIMESH® is a knitted, run-resistant, transparent and non-resorbable net, containing no materials of animal or human origin, suitable for the following applications: hernias and ruptures by laparotomy or laparoscopy route, rectal and genito-urinary prolapses. SURGIMESH® has been especially designed with a framework that offers a resistant structure much appreciated by practitioners.

MONOFILAMENT 100% POLYPROPYLENE

SPECIFIC KNIT WITH SHAPE MEMORY

FLEXIBLE OPEN-STITCH KNIT MAKE THE IMPLANT POROUS FOR GOOD COLONIZATION (FOR GOOD SITE DRAINAGE)

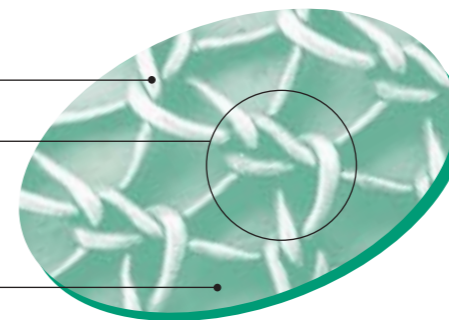

■ PROPERTIES: Composition: 100% polypropylene. High physical characteristics, excellent mechanical resistance over time, chemical inertia (biocompatibility), apyrogenic, lower specific gravity (85 g/m²), elasticity and extensibility (bi-directional), flexible mesh.

■ CHARACTERISTICS: Insensitive to damp: hydrophobic material. Crystallinity level of 60%. Break resistance of net: 11 kg/cm². The mechanical characteristics remain unchanged on implantation. Delivered in double Tyvek peel-off envelopes. Single use.

MALLA DE REFUERZO ABDOMINAL




Se recomienda para los procesos herniarios de la pared abdominal, las eventraciones y los prolapsos rectales y génito-uritarios, por vía laparoscópica o transparietal.

Hecha a partir de fibra de polipropileno extrusionado: SURGIMESH® es una malla de refuerzo tejida, indesmallable, conformable, transparente, irreabsorbible que no tiene derivados de origen animal o humano y que se emplea para: hernias y eventraciones por vía transparietal o laparoscópica, prolapsos rectales y génito-uritarios. SURGIMESH® ha sido especialmente estudiado para ofrecer una estructura resistente muy apreciada por los cirujanos especialistas.

MONOFILAMENTO 100% POLIPROPILENO

TEJIDO ESPECIFICO CON MEMORIA DE FORMA

TEJIDO ANCHO Y FLEXIBLE CON UNA BUENA POROSIDAD DE LA PRÓTESIS PARA FAVORECER UNA BUENA COLONIZACIÓN

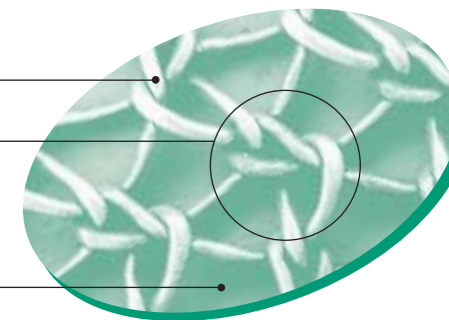

■ PROPIEDADES : Composición : 100% polipropileno. Altas características físicas : excelente constancia en el tiempo, biocompatible, apirogénico, bajo peso específico (85 g/m²), elasticidad, extensibilidad (bí-direccional) y flexibilidad de la malla.

■ CARACTERÍSTICAS : Insensible a la humedad : material hidrófobo. Tasa de cristalinidad de un 60%. Resistencia al desgarro : 11 kg/cm². Las características mecánicas permanecen idénticas durante la implantación. Suministrado en doble bolsa Tyvek. De un sólo uso.



FILET DE RENFORT ABDOMINAL
À MÉMOIRE DE FORME

ABDOMINAL REINFORCEMENT NET
WITH "SHAPE MEMORY"

MALLA DE REFUERZO ABDOMINAL CON
"MEMORIA DE FORMA"

Liste non exhaustive, voir site internet / Inexhaustible list, See on our website
/ Lista no exhaustiva, ver en nuestra página web

| CODE COMMANDE ORDER CODE CÓDIGO | DESIGNATION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN | TYPE SHAPE FORMA |
|---------------------------------------|---|------------------------|
| Réf. 59611p | SURGIMESH 6x11 fil 0,14 | |
| Réf. 2812p | SURGIMESH 8x12 fil 0,14 | |
| Réf. 41515p | SURGIMESH 15x15 fil 0,14 | |
| Réf. 53030p | SURGIMESH 30x30 fil 0,14 | |
| Réf. 541115p | SURGIMESH ovoïde 11x15 fil 0,14 | |
| Réf. 33410g | SURGIMESH AIfi 4,5x10 fil 0,20 | |
| Réf. 40613p | SURGIMESH 1/2 Ovale 6x13 fil 0,14 | |
| Réf. 581515p | SURGIMESH B 15x15 fil 0,14 | |

Tailles spéciales sur commande. Special sizes on request. Posibilidad de tamaños especiales sobre pedido.

La Nouvelle Génération d'Implants
New Generation of Implants
Una Nueva Generación de Implantes




ASPIDE
Médical

Allée Joseph Cugnot - Z.I. La Chazotte
F 42350 LA TALAUDIÈRE - FRANCE

Tél. : +33 (0)4 77 53 16 59
Fax : +33 (0)4 77 53 04 92

Site internet : www.aspide.com
E-mail : aspide@aspide.com